

無機分析用多機能チューブ

DigiTUBEシリーズ

DigiTUBEシリーズは、デスポーザブルの分解容器です。ポリプロピレン製の容器で室温～110℃まで利用可能です。専用ラックとの併用により、片手で蓋を開閉でき、15 mL・50 mL・100 mLの3タイプを用意しています。酸分解後の希釈に便利なメモリを設けています。

注1) 110℃以上で利用される場合はPTFEチューブ、ガラスチューブ、石英チューブを使用してください。

注2) DigiTUBEは洗浄済みではありません。必要に応じて洗浄を行なったからの使用を推奨します。



50 mL用
DigiTUBEs

使い捨て時計皿 Watch Glass

湿式分解による還流用の時計皿(PP製)を使用できます。



DigiTUBE用キャップ

5種類の色のキャップを用意しています。(50 mL用DigiTUBEのみ)
DigiTUBEの見分けに便利です。



ラックロックデザイン機能

専用ラックとの併用により、片手でフタの開閉が可能です。

目盛精度

DigiTUBEの目盛りは、ASTM Standard E542-01 classA (± 0.25 mL)* の保証となります。公差証明書が添付されます。

* : 50 mL DigiTUBEの場合

注) チューブサイズにより、対象となる目盛り・精度は異なります。



公差証明書

底面が平面

底面が平面のため自立が可能です。


主な用途

- ・水中の重金属の前処理 : 水試料に酸を入れ、95℃で有機物の加熱分解処理に
- ・低ブランク処理 : Na、Bなどガラス由来の汚染リスク低減
- ・食品、動物飼料などの前処理 : 0.1～0.5 gの試料に10 mLの強酸を入れて湿式分解可能
- ・試料の保管 : 専用キャップにより中期保管が可能

※ DigiTUBEを使用できる耐酸性の酸分解システムDigiPREPシリーズを用意しています。
価格や仕様などの詳細はお問合せください。

製品ラインアップ

15 mL

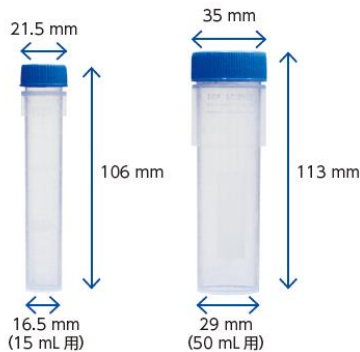

ラックロック機能	キャップ(青)	SCP P/N	入数	Cat.No.	価格	
○	○	010-515-261	1620本×1	8520-50190	52,000	
○	—	010-515-262		8520-50188	42,000	
—	○	010-515-263		8520-50191	52,000	
—	—	010-515-264		8520-50189	42,000	
○	○	010-515-361	540本×1	8520-50240	24,000	
—	○	010-515-363		8520-50241	24,000	
品名		色	SCP P/N	入数	Cat.No.	価格
DigiTUBEs15 mL用キャップ		青	010-515-060	540個	8520-50185	4,600
		透明	010-515-172		8520-50186	4,600

50 mL



ラックロック機能	キャップ(青)	SCP P/N	入数	Cat.No.	価格	
○	○	010-500-261	750本×1	8520-50204	47,600	
—	○	010-500-263		8520-50205	47,600	
○	—	010-500-262	750本×1	8520-50112	41,800	
—	—	010-500-264		8520-50113	41,800	
○	○	010-500-362	25本×30	8520-50230	62,600	
—	○	010-500-364		8520-50231	62,600	
○	○	—	25本×4	8520-50130	13,000	
—	○	—		8520-50131	13,000	
○	○	—	25本×2	8520-50120	7,500	
—	○	—		8520-50121	7,500	
○	○	—	25本×1	8520-50110	5,000	
—	○	—		8520-50111	5,000	
品名		色	SCP P/N	入数	Cat.No.	価格
DigiTUBEs 50 mL用キャップ		黄	010-500-130	250個	8520-50180	2,400
		オレンジ	010-500-140		8520-50181	2,400
		赤	010-500-150		8520-50182	2,400
		透明	010-500-172		8520-50183	3,000
		青	010-500-060		8520-50184	2,400
品名		SCP P/N	入数	Cat.No.	価格	
DigiTUBEs 50 mL用時計皿		—	25個	8520-50114	2,400	
		010-500-081	1000個	8520-50206	37,400	

100 mL

ラックロック機能	キャップ(青)	SCP P/N	入数	Cat.No.	価格
○	○	010-501-261	300本×1	8520-50194	28,000
—	○	010-501-263		8520-50195	28,000
○	○	010-501-362	10本×30	8520-50117	35,000
—	○	010-501-364		8520-50118	35,000
○	○	—	10本×5	8520-50132	10,000
—	○	—		8520-50133	10,000
○	○	—	10本×2	8520-50122	5,500
—	○	—		8520-50123	5,500
品名		SCP P/N	入数	Cat.No.	価格
DigiTUBEs 100 mL用時計皿		010-501-081	500個	8520-50196	28,000



東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 大阪支店 TEL.06(6357)5060 FAX.06(6357)4580
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
 北関東営業所 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術本部 TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。
- あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 http://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

