


GL-SPE 自然落下マニホールド

GL-SPE自然落下マニホールドは、自然落下方式で固相抽出を行うために最適化されたマニホールドです。平成23年8月16日に公開された食安発0816第2号総アフラトキシン試験方法における、多機能カラムによるクリーンアップ、イムノアフィニティカラムによるアフラトキシン分離濃縮法に対応しています。



- ◆ シンプルデザインの自然落下用マニホールド
- ◆ カビ毒分析など自然落下方式の固相前処理に最適
- ◆ デリバリーチップの毛細管現象により、自然落下速度を改善
- ◆ ルアーストップバルブ(別売)により、流速の調整が可能
- ◆ 4 mLバイアルやGL-SPE濃縮管、ナス型フラスコ用のトレーを用意

多機能カラム InertSep® VRA の取付例

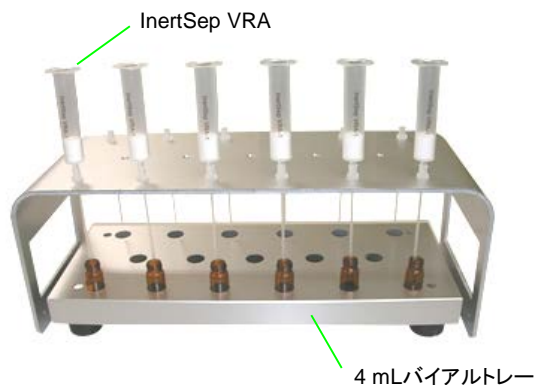

〈SPE自然落下マニホールド〉

自然落下の固相抽出を行う際に最適な、簡便で安価なマニホールドです。ポリプロピレン製の一体型ルアーフィッティング・デリバリーチップを24本付属しています。

〈各種トレー〉

4 mLバイアル用、20 mL濃縮管用、300 mLナス型フラスコ用の3種類を用意しています。

※上記以外のトレーをご希望の場合は、別途ご連絡ください。

〈エクステンションパネル〉

エクステンションパネルをマニホールドの両端に取り付けることで、デリバリーチップの高さを調節できます。4 mLバイアルトレー以外を使用する場合に必要になります。

※デリバリーチップ先端が受器に僅かに入り込むように調整してください。

品名	入数	Cat. No.	価格
GL-SPE 自然落下マニホールド	1台	5010-50430	20,000
GL-SPE 自然落下マニホールド用エクステンションパネル	2枚	5010-50431	10,000
GL-SPE 自然落下マニホールド用4 mLバイアルトレー	1台	5010-50432	13,000
GL-SPE 自然落下マニホールド用20 mL濃縮管トレー	1台	5010-50433	15,000
GL-SPE 自然落下マニホールド用200 / 300 mLナス型フラスコトレー	1台	5010-50434	15,000
GL-SPE 自然落下マニホールド用 デリバリーチップ	24本	5010-50420	6,000


関連製品

品名	入数	Cat. No.	価格
4 mLスクリュウバイアル 不活性処理済み 褐色	100本	1030-46615	7,200
4 mLスクリュウバイアル 不活性処理済み 褐色ラベル付	100本	1030-46616	7,800
PTFE / ラバー付 穴なし 白キャップ	100個	1030-46547	3,100
GL-SPE濃縮管 1.0&2.0 mLメス/20 mL	6本	5010-51020	26,000
透明摺合ナス型フラスコ TS29/38 200 mL	2個	5010-51033	12,000
GL 1,3,6 mL アダプター付リザーバー 25 mL	12本	5010-60015	15,000
InertSepカートリッジアダプター 1,3,6 mL用	12個	5010-60000	7,000
PTFE ルアーストップパルプ	12個	5010-60010	16,000



試料前処理 総合カタログ

各分野で使用する前処理装置や前処理ツール、固相カラムなどを記載しています。

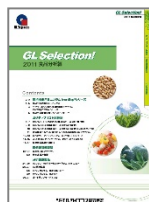

GL Selection! 食品分析編 カタログ

食品に関する分析について紹介しています。アフラトキシンや残留農薬分析など記載しています。

最寄りの弊社支店または営業所までご請求ください。




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
(2017年8月移転)		
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
http://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp

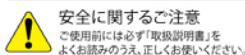

安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。