

# 残留農薬多検体処理用 GL-SPE マニホールドキット20

GL-SPE マニホールドキット20は、固相抽出カラムを20本同時に処理するためのバキュームマニホールドです。また、20 mL, 30 mLの濃縮管に対応するラックやバキュームコントローラーを標準で付属しています。



## <キット内容>


- ・GL-SPE吸引マニホールド × 1台
- ・20 mL/30 mL濃縮管対応ラック × 1個
- ・バキュームコントローラー × 1個
- ・バキュームホース 50 cm × 1本
- ・ステンレス製デリバリーチップ × 20本
- ・PTFE製デリバリーチップ × 20本
- ・プラグ × 20個

注)トラップビンや真空ポンプは、別途必要になります。

## 接続方法

マニホールド、バキュームコントローラー、バキュームポンプ(オプション)、吸引ろ過ビン(オプション)をバキュームホースで接続。

注)個々のカートリッジの通液を調整したい場合は、ルアーストップバルブ(オプション)を使用してください。また、使用しないポートには、プラグを差し込んでください。

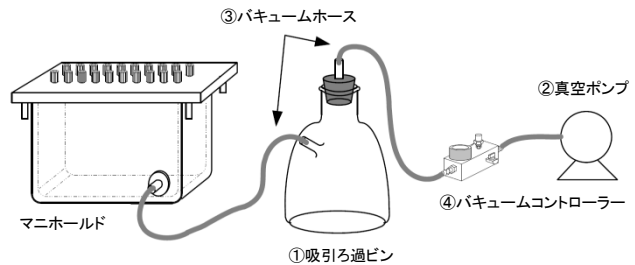

SPEバキュームキット

品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPEマニホールドキット20(20検体仕様)	1式	5010-50007	生産中止
SPEバキュームキット*	1式	5010-50040	87,000



\*:キット内容(ダイヤフラム真空ポンプ×1台、吸引ろ過ビン(トラップビン)3 L×1個、バキュームホース2 m×1本、ホース接続コネクタ×2個)が含まれます。

## GL-SPE マニホールドキット20用交換部品

品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPEマニホールドキット20 上蓋カバーアセンブリ	1式	5010-50135	生産中止
GL-SPEマニホールドキット20 ガasket	2枚	5010-50138	生産中止
GL-SPE溶出マニホールドキット20ラック(20/30 mL濃縮管20本対応)	1組	5010-50137	生産中止
①吸引ろ過ビン3 L (シリコン栓・ホース接続コネクタ付)	1個	5010-50028	27,000
②ダイヤフラム真空ポンプ(中間スイッチ付)	1台	5010-50026	65,000
③バキュームホース2 m	1本	5010-50030	5,000
④バキュームコントローラー	1台	5010-33071	43,000



## GL-SPE溶出マニホールド20 オプション

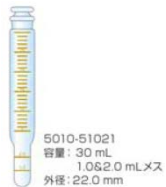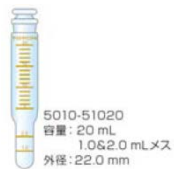

品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPE濃縮管 1 mL & 2 mLメス / 20 mL*1	6本	5010-51020	27,000
GL-SPE濃縮管 1 mL & 2 mLメス / 30 mL*1	6本	5010-51021	41,000
GL-SPE濃縮管 0.5 mL & 1 mLメス / 7 mL	10本	5010-51011	31,000
GL-SPE濃縮管 0.5 mL & 1.0 mLメス / 10 mL	10本	5010-51015	36,000
GL-SPE濃縮管 0.5 mL & 1.0 mLメス / 10 mL(褐色)	10本	5010-51016	40,000
GL-SPE溶出マニホールドキット20ラック(7 mL濃縮管 & 試験管用)*2	1組	5010-50136	生産中止
ルアーストップバルブ PTFE製	12個	5010-60010	16,000
SPE吸引マニホールド用ガラス保護フィルム*3	2枚	5010-50041	4,000
SPE吸引マニホールド用廃液パット ステンレス製	1個	5010-50122	18,500

\*1: GL-SPEマニホールドキット20に付属のラック対応品です。その他の試験管・濃縮管を使用の際は、ラック(Cat.No.: 5010-50136)が必要です。

\*2: 7 mLと10 mLタイプの濃縮管と試験管に対応したラックです。


\*3: ガラスチャンバーの広い面の両側に貼ります。万一破損した際に飛散を抑えるための保護フィルムです。

## 残留農薬前処理に用いられる固相ミニカラム



### InertSep® GC / NH2 & InertSep® GC / PSA


グラファイトミニカラムは、充填密度の均一性が、安定性と再現性のカギになります。InertSepは、機械充填を行っているため、ロット間のばらつきを極力抑えることが可能となり、自然落下でも安定した通液が得られます。

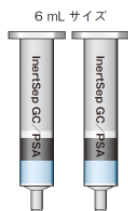


品名	充填量	入数(包装単位)	Cat.No.	価格
InertSep GC / NH2	250 mg/250 mg/ 3mL	50本(10本)	5010-68020	35,000
	500 mg/500 mg/ 6mL	30本(10本)	5010-68022	27,000
InertSep GC / PSA	300 mg/500 mg/ 6 mL	30本(10本)	5010-68011	25,000
	500 mg/500 mg/ 6 mL	30本(10本)	5010-68012	27,000
	1 g/500 mg/ 6 mL	30本(10本)	5010-68013	40,000

### InertSep® C18(脱脂用)

脱脂用のC18ミニカラムは、残存シラノールの影響による農薬損失が大きな問題となります。InertSep C18は、不活性処理を最高レベルまで行なうことで、農薬の吸着損失を極限まで抑えています。

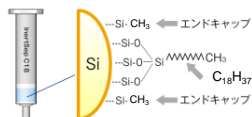

品名	充填量	入数(包装単位)	Cat.No.	価格
InertSep C18	500 mg/6 mL	30本	5010-61004	14,000
	1 g/6 mL	30本	5010-61005	21,000
	2 g/12 mL	20本	5010-61006	23,000

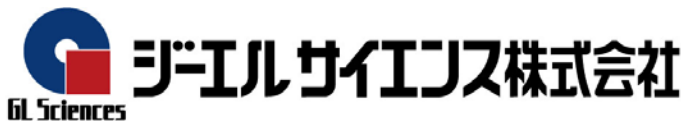

東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
(2017年8月移転)		
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
http://www.gls.co.jp E-mail:info@gls.co.jp

**安全に関するご注意**  
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

AA730-20120918PDF