

固相抽出用カラム

InertSep

MCX FF

MAX FF

×

WCX FF

WAX FF

ミックスモード固相カラム

安定した保持力と、優れた通液性で

食品サンプル前処理に最適



InertSep MCX FF 疎水性ポリマー＋強カチオン交換カラム



InertSep MCX FFは、強陽イオン交換基が修飾されたスチレンジビニルベンゼンポリマー固相です。


逆相、陽イオン交換の作用を発揮し、塩基性化合物を強く保持させることで、酸性及び、中性の不純物からの回収に最適です。

仕様	平均粒子径	: 70 μm	細孔容積	: 1.1 mL/g	pH使用範囲	: 1-14
	表面積	: 480 m ² /g	細孔径	: 9 nm		

品名	カラムサイズ	入数	Cat.No.	定価
InertSep MCX FF	60 mg/3 mL	50本	5010-62700	21,000
InertSep MCX FF	150 mg/6 mL	30本	5010-62701	27,000
InertSep MCX FF	500 mg/6 mL	30本	5010-62702	42,000
InertSep MCX FF	150 mg/12 mL	20本	5010-62703	22,000
InertSep MCX FF	500 mg/20 mL	20本	5010-62704	30,000

※充填剤のみの販売もしています。詳細は、当社営業員までお問い合わせください。

InertSep WCX FF 疎水性ポリマー＋弱カチオン交換カラム

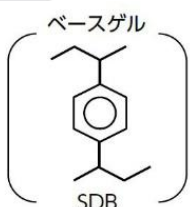

InertSep WCX FFは、弱陽イオン交換基が修飾されたスチレンジビニルベンゼンポリマー固相です。


逆相、陽イオン交換の作用を発揮し、MCX同様に塩基性化合物の前処理に最適です。pHをコントロールすることにより、酸性条件下での強塩基性化合物の回収も可能です。

仕様	平均粒子径	: 70 μm	細孔容積	: 1.1 mL/g	pH使用範囲	: 1-14
	表面積	: 480 m ² /g	細孔径	: 9 nm		

品名	カラムサイズ	入数	Cat.No.	定価
InertSep WCX FF	60 mg/3 mL	50本	5010-62720	21,000
InertSep WCX FF	150 mg/6 mL	30本	5010-62721	27,000
InertSep WCX FF	500 mg/6 mL	30本	5010-62722	42,000
InertSep WCX FF	150 mg/12 mL	20本	5010-62723	22,000
InertSep WCX FF	500 mg/20 mL	20本	5010-62724	30,000

※充填剤のみの販売もしています。詳細は、当社営業員までお問い合わせください。

InertSep MAX FF 疎水性ポリマー＋強アニオン交換カラム

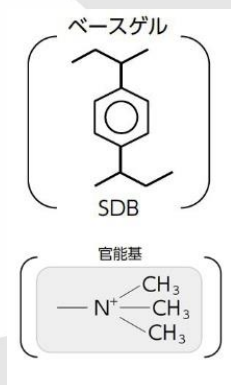

InertSep MAX FFは、強陰イオン交換基が修飾されたスチレンジビニルベンゼン固相です。


逆相、陰イオン交換の作用を発揮し、酸性化合物を強く保持させることで、塩基性及び、中性の不純物からの回収に最適です。

仕様	平均粒子径	: 70 μm	細孔容積	: 1.1 mL/g	pH使用範囲	: 1-14
	表面積	: 480 m ² /g	細孔径	: 9 nm		

品名	カラムサイズ	入数	Cat.No.	定価
InertSep MAX FF	60 mg/3 mL	50本	5010-62740	21,000
InertSep MAX FF	150 mg/6 mL	30本	5010-62741	27,000
InertSep MAX FF	500 mg/6 mL	30本	5010-62742	42,000
InertSep MAX FF	150 mg/12 mL	20本	5010-62743	22,000
InertSep MAX FF	500 mg/20 mL	20本	5010-62744	30,000

※充填剤のみの販売もしています。詳細は、当社営業員までお問い合わせください。

InertSep WAX FF 疎水性ポリマー＋弱アニオン交換カラム

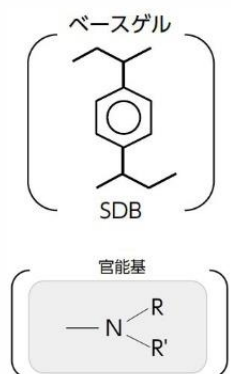

InertSep WAX FFは、弱陰イオン交換基が修飾されたスチレンジビニルベンゼン固相です。

逆相、陰イオン交換の作用を発揮し、酸性化合物を強く保持させることで、塩基性及び、中性の不純物からの精製に最適です。pHをコントロールすることにより塩基性条件下で、酸性化合物の回収も可能です。

仕様	平均粒子径	: 70 μm	細孔容積	: 1.1 mL/g	pH使用範囲	: 1-14
	表面積	: 480 m ² /g	細孔径	: 9 nm		

品名	カラムサイズ	入数	Cat.No.	定価
InertSep WAX FF	60 mg/3 mL	50本	5010-62760	21,000
InertSep WAX FF	150 mg/6 mL	30本	5010-62761	27,000
InertSep WAX FF	500 mg/6 mL	30本	5010-62762	42,000
InertSep WAX FF	150 mg/12 mL	20本	5010-62763	22,000
InertSep WAX FF	500 mg/20 mL	20本	5010-62764	30,000

※充填剤のみの販売もしています。詳細は、当社営業員までお問い合わせください。



ジーエルサイエンス株式会社

東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年11月時点のものです。
AA0983-20201102PDF