


InertCap[®] 1701MS


InertCap 1701 MSは、14 %シアノプロピルフェニル – 86 %ジメチルポリシロキサンを化学結合した中極性カラムです。GC/MS分析用に設計され、世界最高クラスの不活性度と低ブリードを実現しました。InertCap 1301と同じシアノ基を含有しており、InertCap 25に比べて極性は高くなります。農薬のスクリーニング分析などに適しています。

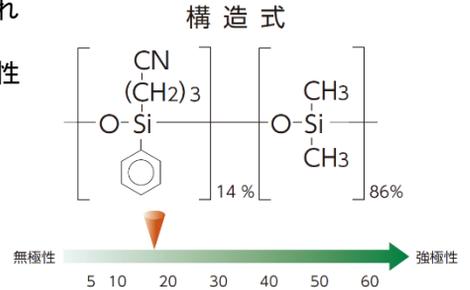

- 14% Cyanopropylphenyl – 86 % Dimethylpolysiloxane
- USP Phase G46 相当
- 中極性カラム
- 化学結合・架橋タイプ
- 農薬、糖類、TMS誘導体、薬物、アルコール、ステロイド分析に最適
- 相当品 VF-1701ms

農薬45成分 一斉分析例

System : GC/MS
 Column : 0.25 mm I.D. × 30 m df = 0.25 μm
 Col.Temp. : 40 °C (1 min) - 30 °C /min - 120 °C - 5 °C/min - 240 °C - 12/min - 300 °C (20 min)
 Carrier Gas : He 1.0 mL/min (constant flow)
 Injection : Splitless
 250 °C
 Detection : MS TIC (m/z 45-600)
 Sample Size : 1 μL
 Sample : 農薬45成分混合溶液

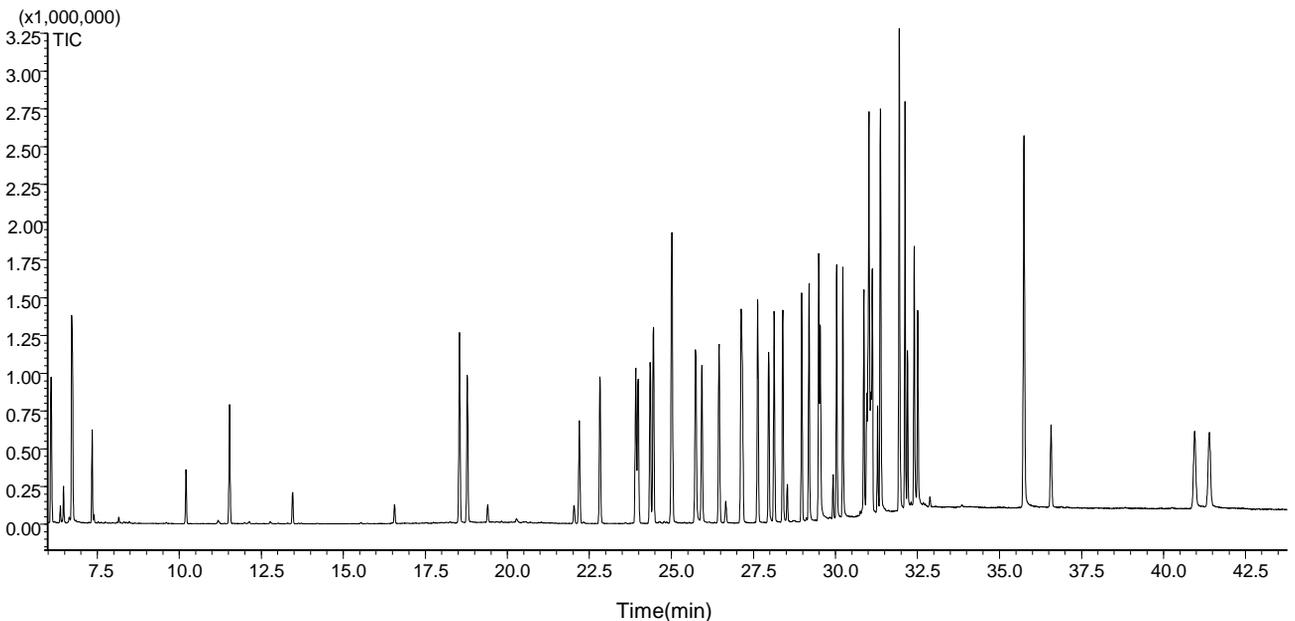

保持時間については、弊社ホームページ(http://www.gls.co.jp/product/gc_capillary_columns/00381.html)を参照してください。

InertCap® 1701MS 価格表

内径 (mm)	長さ (m)	膜厚 (μm)	最高使用温度 (°C)	Cat.No.	価格
0.25	15	0.25	iso.280-prog.300	1010-61622	50,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61624	50,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61625	50,000
	30	0.25	iso.280-prog.300	1010-61642	79,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61644	79,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61645	79,000
	60	0.25	iso.280-prog.300	1010-61662	133,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61664	133,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61665	133,000
0.32	15	0.25	iso.280-prog.300	1010-61722	52,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61724	52,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61725	52,000
	30	0.25	iso.280-prog.300	1010-61742	84,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61744	84,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61745	84,000
	60	0.25	iso.280-prog.300	1010-61762	145,000
		0.50	iso.280-prog.300	1010-61764	145,000
		1.00	iso.280-prog.300	1010-61765	145,000



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



 安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。