

アジレント・テクノロジー 2017-2018 カラム・消耗品 年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日



バイアル、バイアル関連製品：2-3 ページ



LC、LC/MS 関連消耗品：8-9 ページ



Bond Elut 固相抽出製品：4-5 ページ



GC、GC/MS 関連消耗品：10-11 ページ



新製品 Poroshell120 LC カラム：6-7 ページ

アジレントバイアルとバイアル関連製品

キャンペーン内容

アジレントバイアルおよびバイアル関連製品をお買い上げいただきますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン対象製品

アジレントバイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、クロージングマット、オートクリンパ、オートデキャッパ、高性能オートクリンパ、軽量マニュアルクリンパ・デキャッパ



アジレントバイアル、キャップ、セプタム



オートクリンパ
オートデキャッパ




高性能オートクリンパ
※ヘッドを交換することで
さまざまなバイアルで使用できます。

新製品 アジレント A-Line バイアル

業界最高の不活性さを実現

- 従来のバイアルよりさらに高い不活性さを実現しました。
高感度分析において、ロット間差、バイアル間差が小さく、非常に高い回収率を実現します。
- 主に LC、LC/MS での医薬品分析サンプルに最適です。
- 現在バイアルへの吸着が原因で回収率に問題をお持ちのお客様にお勧めです。

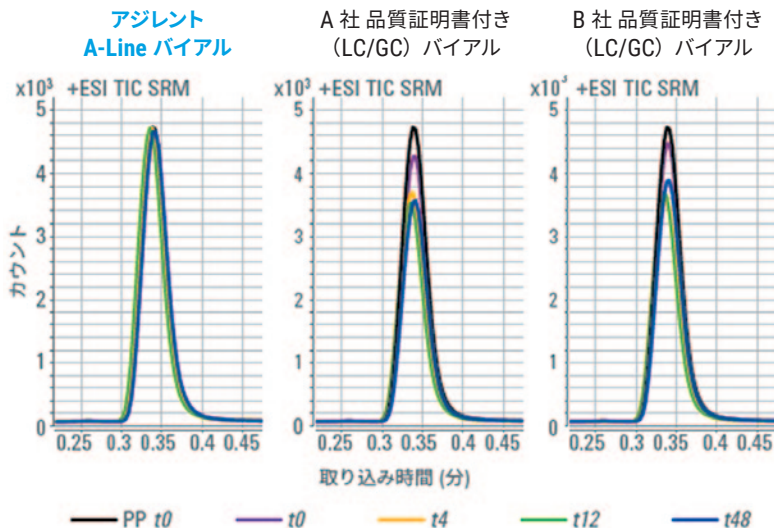

アジレント A-Line バイアル： 長期にわたって成分の完全性を維持

ドキシセピンの分離結果から、アジレント A-Line バイアルが成分の完全性の維持性能が優れていることがわかります。
注：テストはアジレントが実施しました。

アジレント年度末バイアルキャンペーン対象製品例

バイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート			
部品番号	品名	個数	価格(税別)
5190-9589	< New > A-Line、スクリューバイアル、ラベル付、透明、2 mL、100 個	1/pk	¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5190-9590	< New > A-Line、スクリューバイアル、ラベル付、茶色、2 mL、100 個	1/pk	¥4,100 → キャンペーン価格 ¥3,280
5190-9591	< New > A-Line、クリンパバイアル、ラベル付、透明、2 mL、100 個	1/pk	¥3,400 → キャンペーン価格 ¥2,720
5190-9592	< New > A-Line、クリンパバイアル、ラベル付、茶色、2 mL、100 個	1/pk	¥3,800 → キャンペーン価格 ¥3,040
5182-0714	スクリューバイアル、2 mL、広口、透明、100 個	1/pk	¥2,500 → キャンペーン価格 ¥2,000
5182-0715	スクリューバイアル、2 mL、広口、透明、ラベル付、100 個	1/pk	¥2,700 → キャンペーン価格 ¥2,160
5188-6535	スクリューバイアル、2 mL、広口、茶色、100 個	1/pk	¥2,600 → キャンペーン価格 ¥2,080
5182-0716	スクリューバイアル、2 mL、広口、茶色、ラベル付、100 個	1/pk	¥2,900 → キャンペーン価格 ¥2,320
5182-0567	クリンパ/スナップバイアル、1 mL、100 個	1/pk	¥2,600 → キャンペーン価格 ¥2,080
5183-4511	透明スナップキャップ、スリット入、PTFE/Si セプタム、100 個	1/pk	¥4,700 → キャンペーン価格 ¥3,760
5181-8872	250 uL 不活性化ガラスインサート、100 個	1/pk	¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5183-2085	250 uL 先細ガラスインサート、100 個	1/pk	¥5,100 → キャンペーン価格 ¥4,080
5181-3377	400 uL ガラス平底インサート、500 個	1/pk	¥8,200 → キャンペーン価格 ¥6,560
5185-5824	青スクリューキャップ、圧着、スリット入り PTFE/ シリコン、100 個	1/pk	¥4,300 → キャンペーン価格 ¥3,440
5185-5823	青スクリューキャップ、圧着、PTFE/ シリコン、100 個	1/pk	¥3,000 → キャンペーン価格 ¥2,400
5042-1386	96 ウェルプレート、0.5 mL、ポリプロピレン、10 個	1/pk	¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5042-1389	96 ウェルプレート用クロージングマット、シリコン、50 個	1/pk	¥39,000 → キャンペーン価格 ¥31,200
5190-2288	20 mL、ヘッドスペースバイアル、目盛 & ラベル付、透明、100 個	1/pk	¥5,300 → キャンペーン価格 ¥4,240
5190-2286	20 mL、ヘッドスペースバイアル、目盛 & ラベル付、茶色、100 個	1/pk	¥6,200 → キャンペーン価格 ¥4,960
5183-4474	ヘッドスペースクリンパバイアル、丸底、20 mL、透明、100 個	1/pk	¥4,800 → キャンペーン価格 ¥3,840
5190-2239	ヘッドスペースクリンパバイアル、丸底、20 mL、茶色、100 個	1/pk	¥5,200 → キャンペーン価格 ¥4,160
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンパキャップ、安全構造 PTFESi、100 個	1/pk	¥8,200 → キャンペーン価格 ¥6,560
5190-3987	セプタム付 20 mm クリンパキャップ、スチール、高性能セプタム、100 個	1/pk	¥7,900 → キャンペーン価格 ¥6,320

オートクリンパ・オートデキャップ			
部品番号	品名	個数	価格(税別)
5190-3188	オートクリンパ、11 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥89,000 → キャンペーン価格 ¥71,200
5190-3189	オートクリンパ、20 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 ¥72,800
5190-3190	オートデキャップ、11 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 ¥72,800
5190-3191	オートデキャップ、20 mm、リチウムバッテリー付	1/pk	¥91,000 → キャンペーン価格 ¥72,800
5190-4061	高性能オートクリンパ、電源付	1/pk	¥160,000 → キャンペーン価格 ¥128,000
5190-4062	高性能オートクリンパ用クリンパヘッドセット、11 mm	1/pk	¥45,000 → キャンペーン価格 ¥36,000
5190-4063	高性能オートクリンパ用デキャップヘッドセット、11 mm	1/pk	¥41,000 → キャンペーン価格 ¥32,800



バイアルキャンペーン対象製品は
QR コードをスキャン

または

5990-9022JAJP

検索

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1060** とご連絡ください。

サンプル前処理

Bond Elut 固相抽出カラムとウェルプレート

サンプル前処理は、正確なクロマトグラフィーに不可欠です。サンプル前処理によってカラムの寿命が延び、分析のやり直しがなくなり、分離、検出、定量の品質を損なう可能性のある干渉が最小限に抑えられます。

- Bond Elut 固相抽出製品は、分析が困難なマトリックスから干渉を選択的に除去できます。
- 充填剤、カラムの幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

年度末のまとめ買いや在庫にぜひキャンペーンをご利用ください。

Bond Elut, Mega Bond Elut 固相抽出カラムとウェルプレート

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A	Bio Bond Elut	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut AL-B	Bond Elut C1	Bond Elut CBA	Bond Elut Carbon/NH2	Bond Elut Certify	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut AL-N	Bond Elut C2	Bond Elut DEA	Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut CN-U	Bond Elut C8	Bond Elut NH2	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut NEXUS
Bond Elut Diol (20H)	Bond Elut C18	Bond Elut PRS		Bond Elut PCB	Bond Elut ENV
Bond Elut FL	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut SAX/PSA		Bond Elut Na2SO4	Bond Elut LMS
Bond Elut SI	Bond Elut C18 INT	Bond Elut PSA			Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut SAX			
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SCX			
	Bond Elut CH				
	Bond Elut CN-E				
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				

※マニホールドなどアクセサリ、Captiva 除タンパクフィルタ、Captiva シリンジフィルタ、Bond Elut キャッチャーズ製品はキャンペーン対象外です。



キャンペーン内容

アジレント Bond Elut 固相抽出カラムとウェルプレートをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。



固相抽出キャンペーン対象製品は
QRコードをスキャン

または

5990-8338JAJP

検索

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1059** とご連絡ください。

サンプル前処理

Bond Elut QuEChERS EMR Lipid を用いたマトリックス除去効果の検討

GC/MS による残留農薬分析において脂質マトリックスの除去は正確な定量のために非常に重要です。

新製品の Bond Elut EMR Lipid は、脂質除去に特長を持つ新しい充填剤で、今回 QuEChERS 法の分散固相抽出で従来から使用されている PSA と C18 の充填剤とその夾雑物の除去能力の比較を行ないました。

その結果 EMR Lipid はモノ/ジ/トリグリセリド、ステロール類の除去能力が高く、遊離脂肪酸については PSA+C18 の方が除去能力が高いことが明らかとなりました。

マトリックス混合標準品によるマトリックス除去率 (%)


		C18+PSA	EMR Lipid
脂肪酸	パルミチン酸	100	100
	リノール酸 + リノレン酸	99	100
	オレイン酸	98	100
フィトール	フィトール	15	36
トコフェロール	α-トコフェロール	32	68
ステロール	スチグマステロール	67	99
	コレステロール	66	99
モノグリセリド	1-モノミリスチン	36	100
	1-モノパルミチン	36	100
	1-モノステアリン	42	100
フラボノイド	ケルセチン	100	20
	ヘスペレチン	100	40
	ダイゼイン	97	30

各分散固相抽出で効果的に除去できる夾雑物

EMR Lipid	トリグリセリド、ジグリセリド、モノグリセリド、コレステロール
PSA+C18	遊離脂肪酸、フラボノイド類



図：実試料でのマトリックス除去効果の比較クロマトグラム

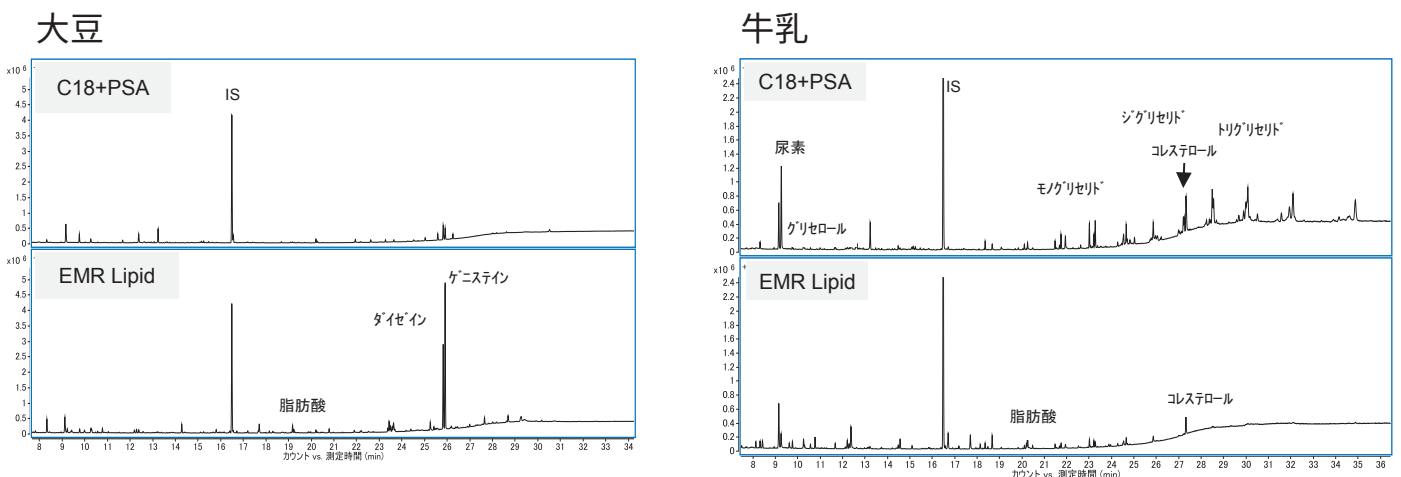


前処理、分析条件など詳しくは、GC-MS-201701YS-001 Bond Elut EMR Lipid を用いたマトリックス除去効果の検討をご参照ください

新製品 アジレント InfinityLab Poroshell120 キラルカラム

- Poroshell120 シリーズに、キラル充填剤が追加されました。
- キラル分析においても表面多孔性カラムの特徴を生かした、高速高分離分析が可能です。
- 4種類の充填剤で、あらゆるキラル分離に対応します。
- 内径 2.1 mm、4.6 mm、長さ 50 mm、100 mm、150 mm をご用意。




A 社全多孔性キラルカラム 4.6 x 250 mm, 5 μm

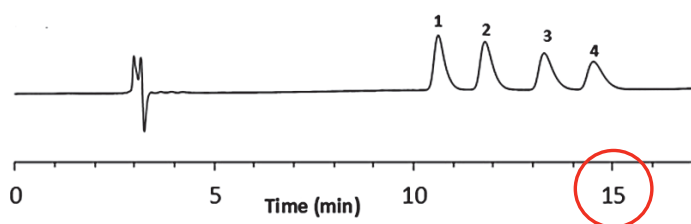


1. D- (+) -Amphetamine
2. L- (-) -Amphetamine
3. D- (+) -Methamphetamine
4. L- (-) -Methamphetamine

移動相: メタノール / 酢酸 / アンモニア水 (100/0.1/0.02)
 流速: 1.0 mL/min
 カラム温度: 室温
 検出: 220 nm

アジレント InfinityLab Poroshell120 キラル -V カラム 4.6 x 100 mm, 2.7 μm

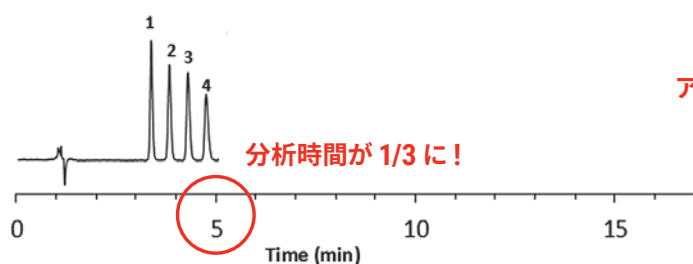

アンフェタミン類の光学異性体を
5分以内で分離可能

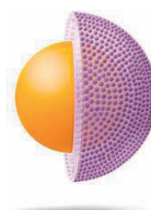

アジレント InfinityLab Poroshell120 キラルカラム 充填剤ラインナップ

カラム名	キラルセクター	分離タイプ	主なアプリケーション
Poroshell120 キラル -CF	Derivatized cyclofructan	順相 極性有機	1級アミン
Poroshell120 キラル -CD	Derivatized cyclodextrin	逆相 極性有機	汎用
Poroshell120 キラル -T	Teicoplanin (macrocyclic glycopeptide)	逆相 極性イオン	アミノアルコール、アミノ酸など
Poroshell120 キラル -V	Vancomycin (macrocyclic glycopeptide)	逆相 極性イオン	タンパク質結合型カラムと同様な アプリケーション

※部品番号、価格についてはお問い合わせください。

※ Poroshell120 キラルでのアプリケーション例を多数、ご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

アジレント InfinityLab Poroshell 120 カラム (Poroshell120 全製品対象) をお買い上げただけですと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間: 2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1059** とご連絡ください。

InfinityLab Poroshell120 HILIC-Z カラム

- Poroshell120 に、両性イオン型官能基固定相のラインナップが発売になりました。
- PEEK-lined (ハードウェア外側：ステンレス、内側：PEEK) カラムはリン酸基など金属配位性吸着を起こすサンプルに対しても良好なピーク形状とリカバリーが得られます。
- 高 pH 領域 (pH12 まで)、最高 80 °C での使用が可能です。
- 内径 2.1 mm、3.0 mm、4.6 mm、長さ 50 mm、100 mm、150 mm、ガードカラムをご用意。※ PEEK-lined のガードカラムは未発売です。




InfinityLab Poroshell120 HILIC-OH5 カラム

- HILIC and HILIC-Z 相とは異なる選択性をご提供します。
- 内径 2.1 mm、4.6 mm、長さ 50 mm、100 mm、150 mm、ガードカラムをご用意。

非誘導体化アミノ酸の LC/MS 分析

ピーク形状とリテンションタイムの再現性、感度に優れています。

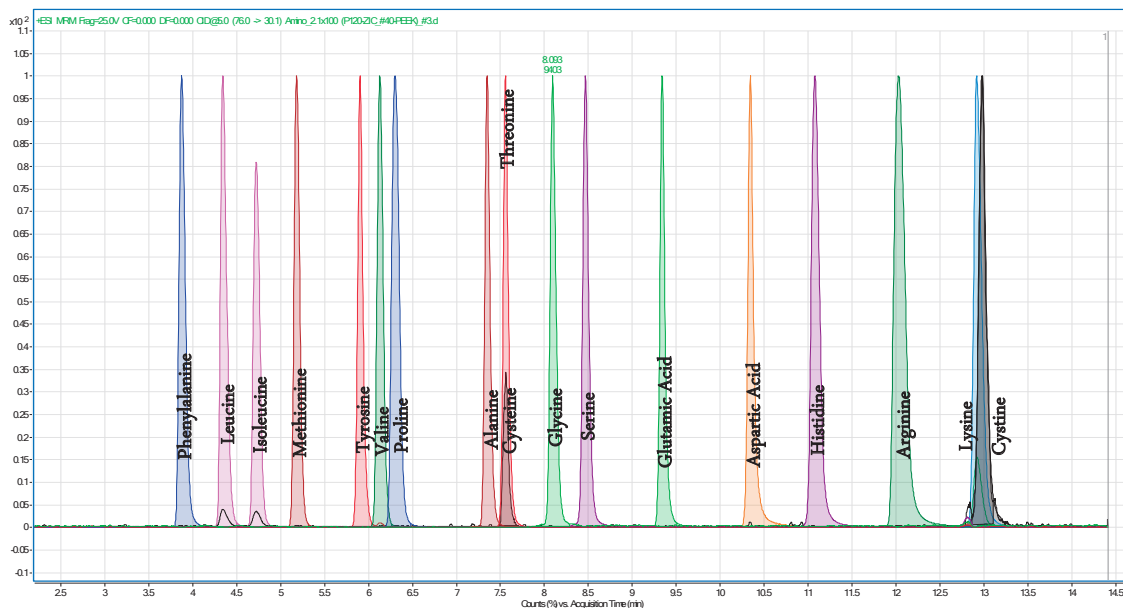

InfinityLab Poroshell HILIC-Z
2.1 x 100 mm, 2.7 μm

A: 20 mM ammonium formate in H₂O, pH3
B: ACN; LC-QQ グラジエントメソッド



Poroshell120 キャンペーン対象製品は
QR コードをスキャン

または

5991-4352JAJP

検索



Poroshell120 1.9 μm キャンペーン対象製品は
QR コードをスキャン

または


5991-7352JAJP

検索

※ Poroshell120 キラル、HILIC-Z、HILIC-OH5 のキャンペーン対象製品についてはお問い合わせください。

アジレント InfinityLab フィッティング

- 手締めタイプのフィッティングのため、スパナなどの工具が必要なく、スプリング内蔵のため、手締めでもゼロデッドボリュームが保たれます。
- すべてのタイプの UHPLC カラムで使用可能です。
- 200 回以上使用可能な耐久性、キャピラリーのみ、フェラルのみの交換が可能です。 ※キャピラリーとフェラルは専用。

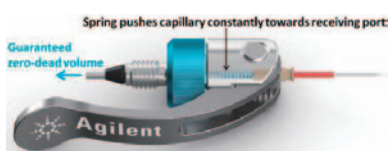

InfinityLab クイックコネクティフィッティングは、手締めで接続した後、レバーを閉じることで 130 MPa まで使用可能です。



InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)
※ 130 MPa まで耐圧がありますが、工具での増締めが必要です。

部品番号	品名	価格 (税別)
 InfinityLab クイックコネクティフィッティング (130 MPa 耐圧)		
5067-5961	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.075 x 105 mm	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
5067-5957	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 105 mm	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
5067-5958	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 150 mm	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
5067-5959	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 220 mm	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
5067-5960	クイックコネクティフィッティングアセンブリ 0.12 x 280 mm	¥36,000 → キャンペーン価格 ¥28,800
※アセンブリは、フィッティング、キャピラリー、フェラルのセットで接続に必要なものがすべて揃っています。		
 InfinityLab クイックターンフィッティング (60 MPa 耐圧)、専用キャピラリー		
5067-5966	クイックターンフィッティング ※別途ロングソケットのキャピラリーと、キャピラリー反対側接続用の金属フェラル、ナットが必要です。	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5500-1188	ステンレスキャピラリー、0.12 mm x 105 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1189	ステンレスキャピラリー、0.12 mm x 150 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1190	ステンレスキャピラリー、0.12 mm x 220 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1191	ステンレスキャピラリー、0.12 mm x 280 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1192	ステンレスキャピラリー、0.12 mm x 500 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1193	ステンレスキャピラリー、0.17 mm x 105 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000
5500-1194	ステンレスキャピラリー、0.17 mm x 150 mm、ロングソケット	¥5,000 → キャンペーン価格 ¥4,000

キャンペーン内容

アジレント InfinityLab クイックコネクティ・クイックターンフィッティングをお買い上げいただけると、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。



InfinityLab フィッティング
キャンペーン対象製品は
QR コードをスキャン

または

5991-5164JAJP


検索

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日まで


※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1060** とご連絡ください。

アジレント InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- HPLC で使用する一般的な溶媒ボトルに適合 (GL45 など)
- ベントバルブにタイムストリップ (ラベルタイマー) が付き、ベントバルブの交換時期が分かります。
- HPLC 移動相で使用する溶媒ボトルのデザインが一新されました。人間工学に配慮したデザインを採用。本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。
- カラフルなシリコンボトルタグを発売。4色で色分けすることでボトル内の溶媒の種類を明確に識別。

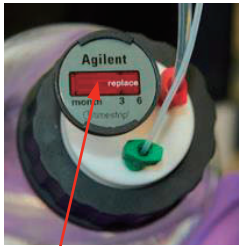

ベントバルブ、チャコールフィルタのタイムストリップをご確認ください！
すべて赤くなっていたら交換時期です。

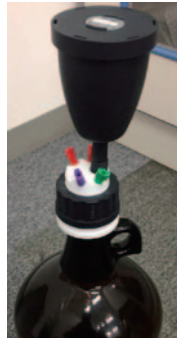

5043-1192 ガロン瓶用
変換アダプタを使用すると、
使用済ガロン瓶を廃液ボトル
として使用できます。

写真は

5043-1192 変換アダプタ
5043-1220 4ポートキャップ
5043-1193 チャコールフィルタを使用



溶媒スリムボトルは、
セーフティキャップと
組み合わせて使用できます。

部品番号	品名	価格 (税別)
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用		
5043-1217	A-Line セーフティキャップ、GL45 1ポート、1ベントバルブ	¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5043-1218	A-Line セーフティキャップ、GL45 2ポート、1ベントバルブ	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600
5043-1219	A-Line セーフティキャップ、GL45 3ポート、1ベントバルブ	¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5043-1220	A-Line セーフティキャップ、GL45 4ポート、1リークホース	¥18,000 → キャンペーン価格 ¥14,400
5043-1190	タイムストリップ付きベントバルブ、PTFE、1µm	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5043-1214	フィッティング、外径 1.6 mm チューブ用、PFA (2個)	¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5043-1215	フィッティング、外径 2.3 mm チューブ用、PFA (2個)	¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
5043-1216	フィッティング、外径 3.2 mm チューブ用、PFA (2個)	¥3,600 → キャンペーン価格 ¥2,880
InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用		
5043-1221	5043-1196 (6 L 廃液ボトル、GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5043-1193	チャコールフィルタ (58 g)、タイムストリップ付、廃液ボトル用	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI38 (F)	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5043-1198	スクリュープラグ、1/8 インチ、PTFE、2個	¥5,700 → キャンペーン価格 ¥4,560
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ、PTFE、2又	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
InfinityLab 溶媒スリムボトル		
9301-6524	溶媒スリムボトル、透明、1,000 mL	¥2,000 → キャンペーン価格 ¥1,600
9301-6526	溶媒スリムボトル、茶色、1,000 mL	¥4,900 → キャンペーン価格 ¥3,920
9301-6529	識別用シリコンリング (8個、4色)	¥3,900 → キャンペーン価格 ¥3,120
9301-6530	アジレントロゴ入り溶媒ボトルラベル (100枚)	¥12,000 → キャンペーン価格 ¥9,600

キャンペーン内容

アジレント InfinityLab セーフティキャップ・溶媒スリムボトルをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。



InfinityLab セーフティキャップ
キャンペーン対象製品は
QRコードをスキャン

または

5991-5162JAJP



検索

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1060** とご連絡ください。

GC、GC/MS 用セルフタイトカラムナット (アジレント GC、島津 GC 用)

工具のいらない GC カラム接続
簡単・確実に接続できる手締めナット
島津 GC、GC/MS での使用にもお勧めです。

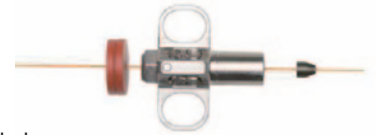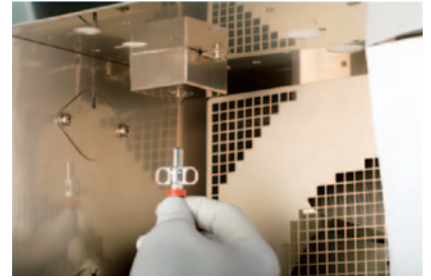

- 信頼性の高い接続** : カラムナット内部にスプリングが内蔵されていることにより、フェラルが常にカラム接続部に密着され、リークのないシールを実現します。
- 時間のロスを回避** : オープン昇温プログラム後に、カラムナットを締めなおす必要がありません。
- 使いやすさ** : 指で締められるため、スパナなどの工具が必要なく、昇温後の増締めも不要です。どなたでも一貫性の高い確実なカラム接続が可能です。
- 迅速なメンテナンス** : 低トルクのため、取り外しの際のフェラルの貼りつきや割れを防止します。
- 低カラムブリード** : リークを防止することで、カラム寿命を延ばします。

部品番号	品名	ナット接続口形状	価格 (税別)
セルフタイトナット (アジレント用)			
5190-5233	セルフタイトナット、MS トランスファライン用		¥10,000 → キャンペーン価格 ¥8,000
5190-6194	セルフタイトナット、注入口および検出器用		¥9,400 → キャンペーン価格 ¥7,520
セルフタイトナット用フェラル (アジレント用) ※注: フェラルはショートフェラルを使用します。			
5181-3323	フェラル、0.4 mm、グラファイト/ポリイミドショート、内径 0.25 mm カラム用、10 個		¥7,800 → キャンペーン価格 ¥6,240
5062-3514	フェラル、0.5 mm、グラファイト/ポリイミドショート、内径 0.32 mm カラム用、10 個		¥7,300 → キャンペーン価格 ¥5,840
5062-3512	フェラル、0.8 mm、グラファイト/ポリイミドショート、内径 0.53 mm カラム用、10 個		¥7,400 → キャンペーン価格 ¥5,920
セルフタイトナットとフェラルのキット (島津用) ※注: フェラルはショートフェラルを使用します。			
8001-0015	セルフタイトカラムナットキット、島津用、ナット、MS ナット各 1 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付 <small>※注入口と MS インターフェースのナットの形状が異なる時のみご利用ください。</small>	A と B	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥21,600
8001-0016	セルフタイトカラムナットキット、島津用、ナット× 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付	 B	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥20,800
8001-0017	セルフタイトカラムナットキット、島津用、ナット× 2 個、内径 0.32 mm カラム用フェラル 10 個付	B	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥20,800
8001-0018	セルフタイトカラムナットキット、島津用、ナット× 2 個、内径 0.53 mm カラム用フェラル 10 個付	B	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥20,800
8001-0020	セルフタイトカラムナットキット、島津用、MS ナット× 2 個、内径 0.25 mm カラム用フェラル 10 個付	 A	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥20,800

キャンペーン内容

アジレント GC、GC/MS 用セルフタイトカラムナットをお買い上げいただけますと、キャンペーン期間中何度でも定価より **20%OFF** でご提供いたします。



セルフタイトカラムナット
キャンペーン対象製品は
QR コードをスキャン

または

5991-5518JAJP

検索

キャンペーン期間: 2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1060** とご連絡ください。

アジレントガスフィルタキャンペーン

年末・年度末の機器メンテナンスの際、
ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントのガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。



ガスクリーンフィルタは、インジケータの色を確認して、色が変わっていたらカートリッジ交換時期です。

部品番号	品名	価格 (税別)
ガスクリーンフィルタスタータキット		
CP736530	ガスクリーンフィルタキット、1/8 インチ、4 ポジション	¥221,000 → キャンペーン価格 ¥176,800
CP17976	ガスクリーン GC/MS フィルタキット、1/8 インチ、1 ポジション	¥91,000 → キャンペーン価格 ¥72,800
コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用) ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット、1 フィルタ、ステンレス、3 mm 用	¥69,000 → キャンペーン価格 ¥55,200
ガスクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。		
CP17969	ガスクリーン CO2 除去フィルタ	¥24,000 → キャンペーン価格 ¥19,200
CP17970	ガスクリーン酸素除去フィルタ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
CP17971	ガスクリーン水分除去フィルタ	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
CP17972	ガスクリーンチャコールフィルタ	¥26,000 → キャンペーン価格 ¥20,800
CP17973	ガスクリーン GC/MS フィルタ	¥33,000 → キャンペーン価格 ¥26,400
大型ユニバーサルトラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ、ヘリウム、GC/MS 用、1/8 インチ	¥44,000 → キャンペーン価格 ¥35,200
BHT-4	大型炭化水素トラップ、750 cc、1/4 インチ用	¥38,000 → キャンペーン価格 ¥30,400
S 字トラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
5060-9084	コンディショニング済み水分トラップ、1/8 インチ	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
5060-9096	コンディショニング済み炭化水素トラップ、1/8 インチ	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600

キャンペーン内容

アジレントガスフィルタ製品をお買い上げいただけると、
キャンペーン期間中何度でも
定価より **20%OFF** でご提供いたします。



ガスフィルタキャンペーン
対象製品は
QR コードをスキャン

または

5991-1056JAJP

検索

※注：91-109 ページが対象製品です。

キャンペーン期間：2017年11月20日～2018年3月31日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 1060** とご連絡ください。

詳細情報

ホームページ:

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ:

フリーダイヤル **0120-477-111**



詳細については、
QR コードを
スキャンしてください。

アジレント・テクノロジー株式会社

本社 〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

email_japan@agilent.com

※本文記載の内容は予告なく変更する場合があります。